


NeoVoir

neovoir.com



NeoVoir 3D

*All in one 3D Professional
Facial Skin Analyzer*

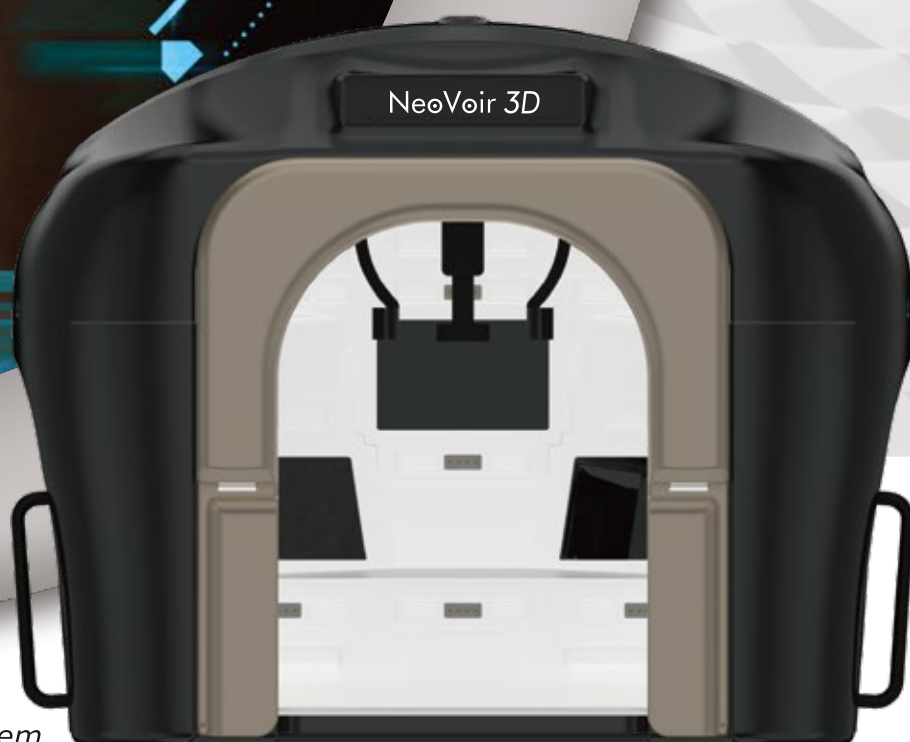

NO.1 Facial Skin Analyzing System

肌分析器専門メーカーのオールインワン3Dモデル

4つの異なる光源を備えた世界初の肌分析器

1回の撮影で肌の状態を評価し、
顔全体の輪郭を確認できる
NeoVair 3Dの総合的な分析力を
体験してください。

3D肌分析のトレンドに対応し、
従来の2D肌分析器の限界を超え、
より包括的で正確な分析を提供します。



3D画像を回転させて、患者様にも分かりやすい
カウンセリングをすることができます。

顔全体の肌トラブルや、弾力性を容易に確認できます。

Light Sources

- ☑ 14項目の肌の問題点を明らかにする4つの光源を使用し、簡単に確認することができます。
- ☑ NeoVair 3Dを使用することによって、顔を包括的な画像で分析し、患者様に最適な治療方法を提供することができます。



NL (一般光)

毛穴、しわ、肌色タイプ、
クマ



SL (光沢光)

光彩、未来しわ、細かい
シワ、肌のキメ



PL (偏光)

赤み、ブラウン色素、
表皮性色素、ブラック
ヘッド



UV (紫外線)


皮脂、メラニン、
ポルフィリン（炎症性皮
脂）

Functions

— NeoVair 3Dは、顔全体を3次元で正確に見ることができる肌分析器 —

バーチャル成形手術

成形手術の結果をバーチャルで視覚化し、シミュレーションを行い、手術後の潜在的な安全性が確認できます。

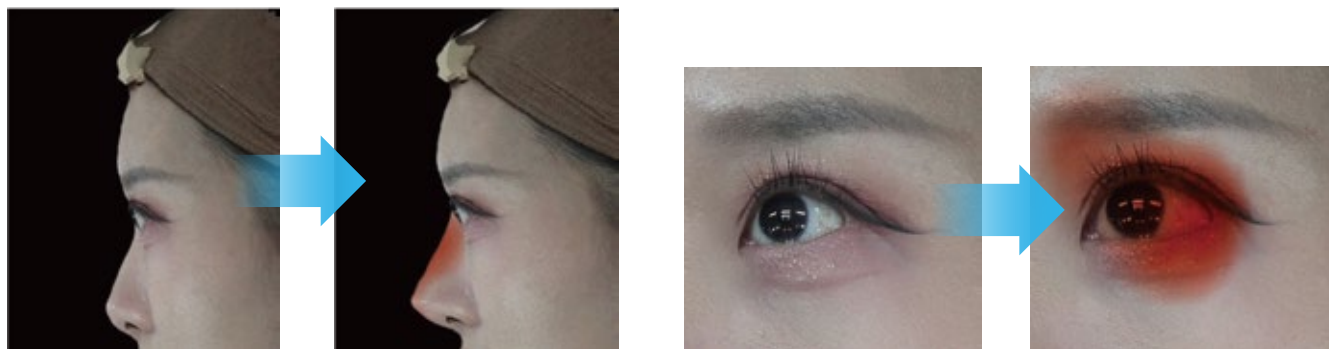


長さと角度の測定

客観的なデータによって正確な測定値を患者様に伝え、しっかりとしたカウンセリングを行うことができます。




部分3Dモード

顔の一部を指定し、詳細な3D画像で肌の状態を確認することができます。

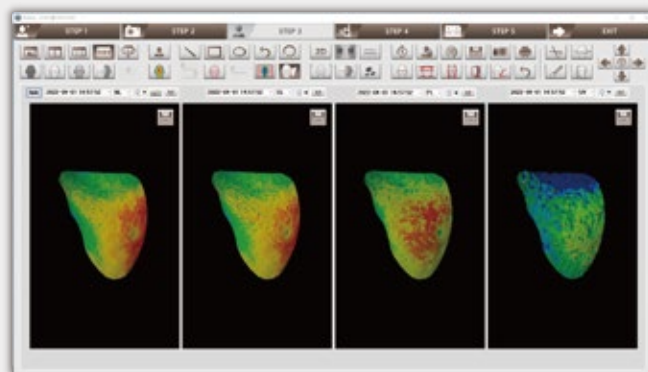


カラーマップと等高線

得られた3次元データをもとに、カラーマップと等高線で顔の高低を確認することができます。

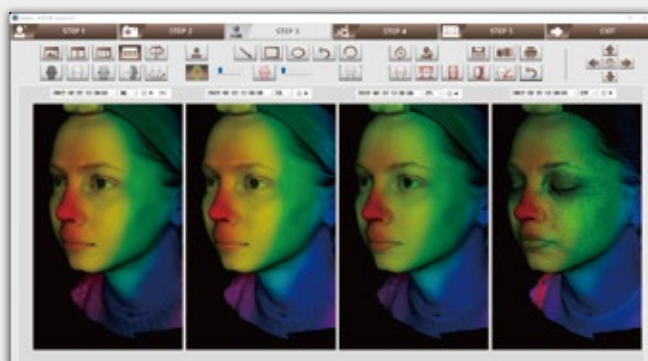


バーチャルレーザー治療

患者様にレーザー治療による期待される結果を分かりやすく提示し、治療の手順をしっかりと理解していただけます。

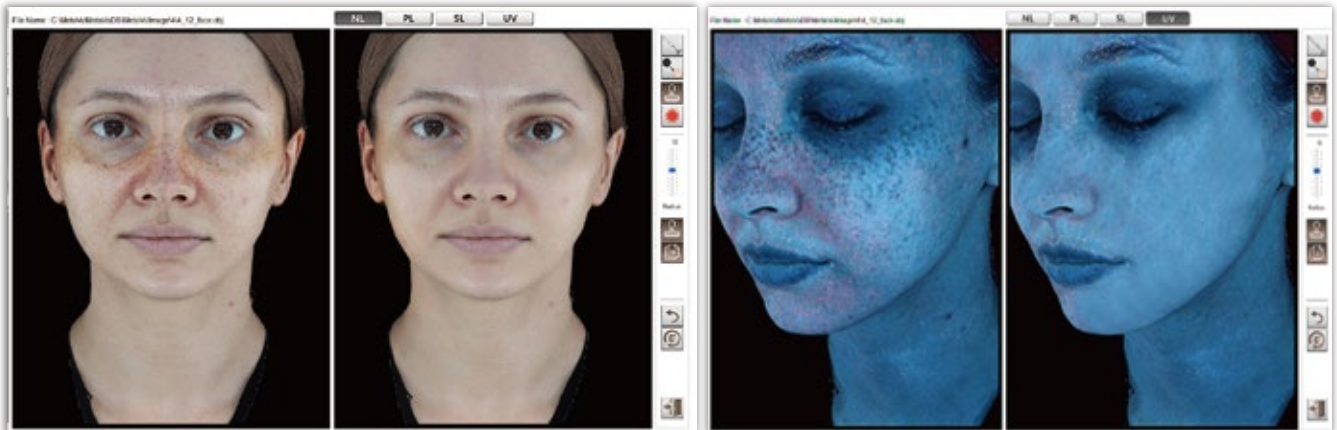

毛穴・シワ・色素沈着シミュレーション

肌シミュレーションを使用して、管理の有無によって変わってくる肌の状態の比較と、予測を提示します。

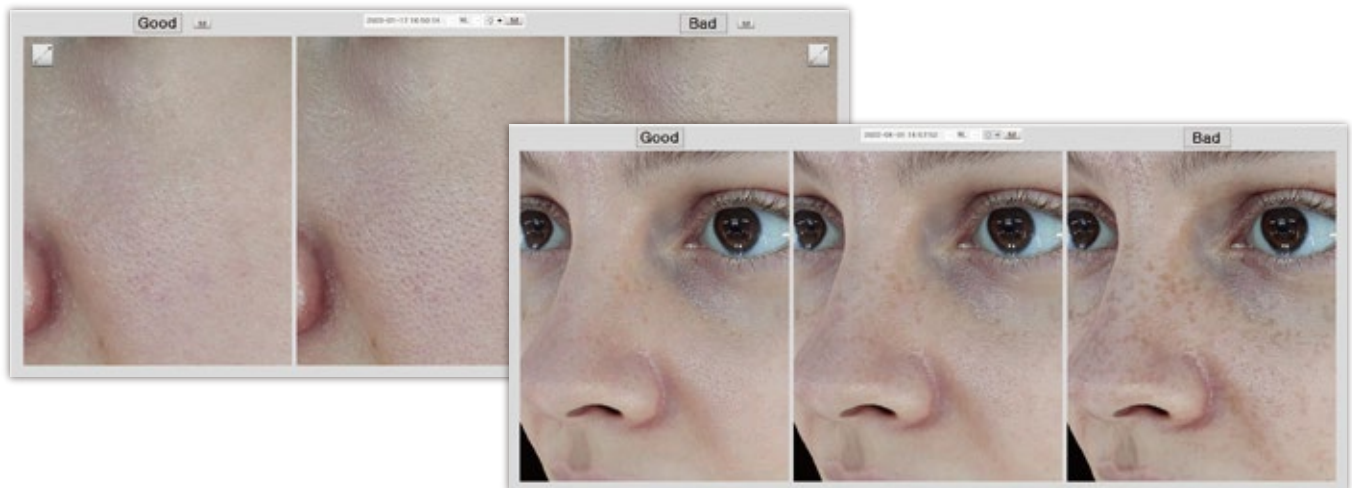

全画面表示モード

左上のアイコンをクリックすると、全画面表示モードを使用することができます。



オーバーレイモード

二つの違う光源の画像を重ねて見ることによって肌の問題点を確認し、比較します。
治療の進行による肌の変化も確認できます。




Results

- ✓ 14項目以上の分析結果によって、詳細に問題点を提示します。
- ✓ 各治療の前後の画像を比較して、患者様の期待を上回る治療計画を提案することができ、正確さ、顧客満足、どちらにも応えます。



01 総合分析画面

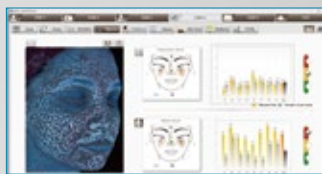


02 メラニン



03 皮脂



04 肌のトーン

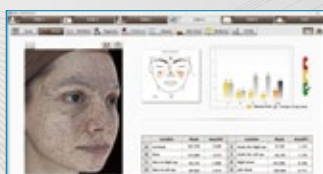

05 毛穴




06 しわ




07 未来しわ



08 色素沈着

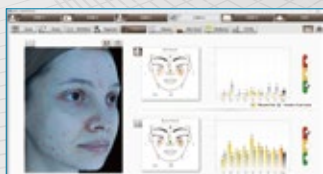

09 赤み

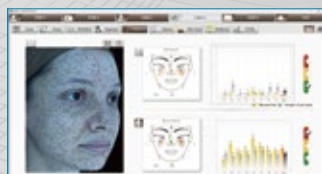


10 ブラウン色素



11 ポルフィリン



12 肌の輝き（光彩）

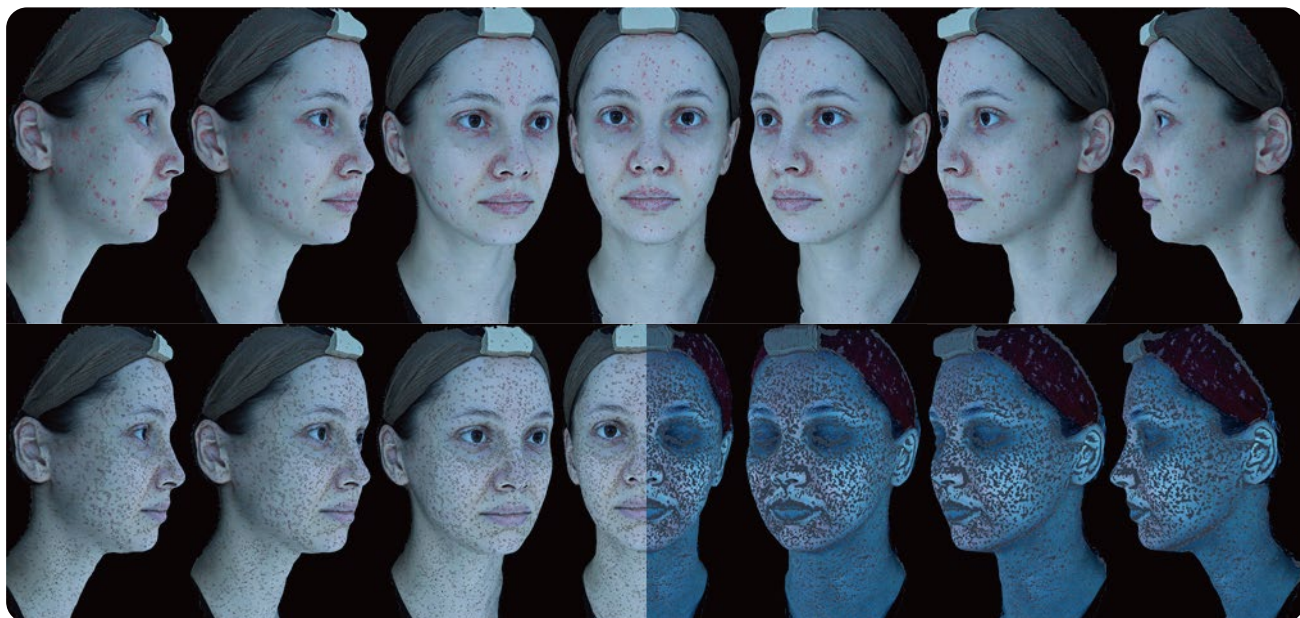


ネオヴォワール3Dであなたの美しさを発見しましょう！
3次元画像によって、肌を詳細に明らかにしていきます

NeoVair 3Dは、問題点の正確な指摘と革新的な3D分析機能によって
治療を始めることができます

Merits

- ☑ 簡単に操作できる「撮影ボタン」

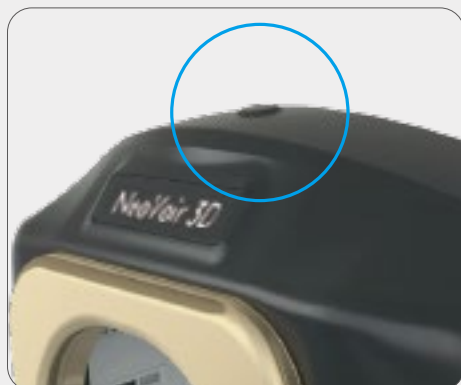

- ☑ 揺れ防止「ヘッドレスト」



- ☑ 外部光を遮断する「遮光ベローズ（蛇腹）カバー」



※ カバー収納時



※ カバー使用時



Specifications

カメラ	Canon EOS M6 Mark II 3 台
ピクセル	32.5 メガピクセル
イメージセンサー	APS-C 1:1.6 CMOS
レンズ	18mm カスタマイズ レンズ
フォーカス	固定フォーカス コントロール
入力電力	DC 19.5V / 11.8A
サイズ / 重量	85 (L) x 70 (W) x 69 (H) cm / 20kg

